

Lunettes nasales à oxygène

Sans latex



Les lunettes nasales sont destinées à délivrer de l'oxygène à faible débit.

La **concentration d'oxygène** obtenue est proportionnelle :

- Au débit d'oxygène
- Au volume courant du patient
- Au débit inspiratoire
- Au volume du nasopharynx

Utilisation :

- Assistance médicale d'urgence
- Service des urgences
- Bloc opératoire
- Salle de réveil
- Soins intensifs
- Médecine générale
- Soins à domicile

| Guide de débit | |
|----------------|------------------|
| Débit l/min | FiO ₂ |
| 1 | 24 % |
| 2 | 28 % |
| 3 | 32 % |
| 4 | 36 % |
| 5 | 40 % |
| 6 | 44 % |

La concentration d'oxygène fournie est de 24 - 44 %¹ en fonction du mode de respiration du patient.

L'utilisation d'air humidifié est recommandée en cas d'utilisation d'un débit de 4 - 6 l/min pour minimiser les irritations locales de la muqueuse nasale provoquées par l'oxygène sec.

Caractéristiques des lunettes standard :

- Mise en place simple et rapide
- Forme anatomique souple
- Fixation facile et confortable
- Les patients peuvent parler, manger et boire
- Permet d'observer la couleur du visage et les signes vitaux
- Sans latex – élimine le risque de réaction allergique au latex et accroît la sécurité du patient



Lunette nasale standard.

Lunettes nasales Sof-Touch

La conception et le processus de fabrication spécifiques permettent d'obtenir une finition souple et douce pour plus de confort.



Lunette nasale Sof-Touch.

Caractéristiques des lunettes Sof-Touch :

- Embouts courbes mieux adaptés à l'anatomie du patient
- Embouts extrêmement souples et confortables
- Les embouts en contact avec la muqueuse ne contiennent pas de DEHP
- Risque réduit d'irritations et d'endolorissement de la lèvre
- Lunette transparente et légère
- Utilisation à court et à long terme

Lunettes Mac-Safe


La lunette nasale Mac-Safe est destinée à fournir de l'oxygène tout en surveillant la PaCO₂ de fin d'expiration. La lunette fournit de l'oxygène par le biais de deux orifices inférieurs, tandis que les embouts nasaux recueillent le CO₂ expiré dans le tube de prélèvement de gaz.

Domaines d'utilisation :

- Bloc opératoire
- Salle de réveil
- Soins intensifs
- Service des urgences
- Médecine générale

Caractéristiques des lunettes Mac-Safe :

- Mise en place simple et rapide
- Forme anatomique, souple et légère
- Embouts nasaux courbes
- Permet d'observer la couleur du visage et les signes vitaux
- Les patients peuvent parler, manger et boire
- Sans latex – élimine le risque de réaction allergique au latex et accroît la sécurité du patient
- Utilisation à court et à long terme

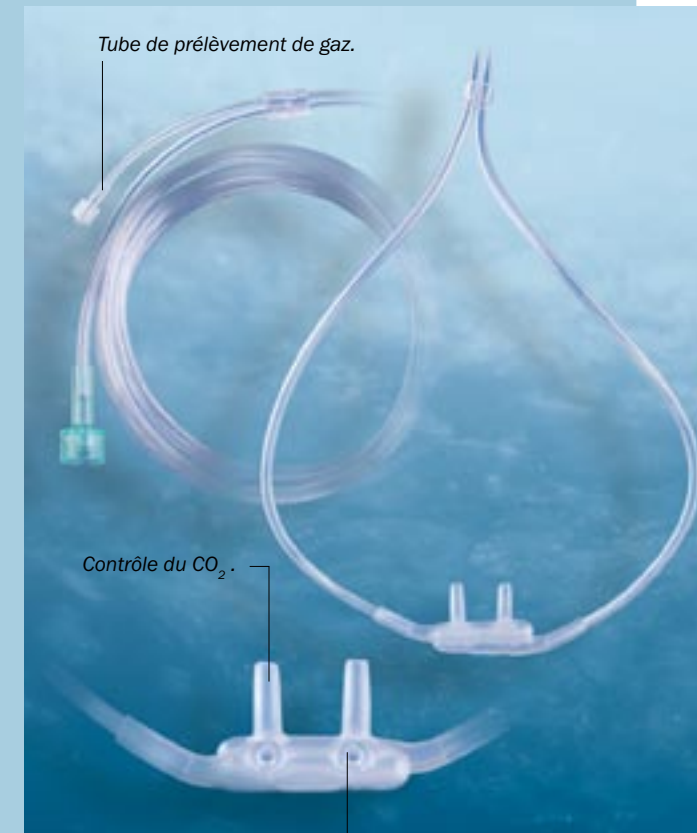

Apport d'oxygène au patient.



Fixation des lunettes nasales.

¹ Respiratory Care Equipment. Mosby, J.M Cairo, Susan P. Pilbeam. Sixième édition 1999. p. 75.



Lunettes à oxygène Sondes à oxygène Tubulures à oxygène

Tubes à oxygène



Lumière standard



Lumière étoilée (débit protégé)

Connecteurs











Connecteur Fits-All



Connecteur standard

Connecteur mâle/femelle

Connecteur mâle

| REF | Description | Taille | Couleur | Emballage | Tube à oxygène m | Lumière | Connecteur | Unités bte/carton |
|--|--|------------|---------|---------------|------------------|----------|--------------|-------------------|
| Lunettes nasales à oxygène | | | | | | | | |
|  304MM | SOF-TOUCH, embouts courbes | Adulte | Transp. | Sachet propre | 2,1 | Standard | Standard | 50 |
| 318MM | SOF-TOUCH, embouts courbes | Adulte | Transp. | Sachet propre | 2,1 | Etoilée | Standard | 50 |
| 319MM | SOF-TOUCH, embouts courbes | Adulte | Transp. | Sachet propre | 4,2 | Etoilée | Standard | 50 |
| 332MM | SOF-TOUCH, embouts courbes | Enfant | Transp. | Sachet propre | 2,1 | Etoilée | Standard | 50 |
| 3337MM | SOF-TOUCH, embouts droits | Nourrisson | Transp. | Sachet propre | 2,1 | Etoilée | Fits-All | 50 |
|  302MM | Standard, embouts droits | Adulte | Transp. | Sachet propre | 2,1 | Standard | Standard | 50 |
| 312MM | Standard, embouts droits | Adulte | Transp. | Sachet propre | 2,1 | Etoilée | Standard | 50 |
| 302-14MM | Standard, embouts droits | Adulte | Transp. | Sachet propre | 4,2 | Etoilée | Standard | 50 |
|  29029002 | Standard, embouts droits | Adulte | Transp. | Sachet propre | 2,0 | Standard | Standard | 100 |
| 29008490 | Standard, embouts droits | Adulte | Vert | Sachet propre | 2,0 | Standard | Standard | 100 |
| 29028002 | Standard, embouts droits | Adulte | Transp. | Sachet propre | 2,0 | Standard | Mâle/femelle | 100 |
| 29001490 | Standard, embouts droits | Adulte | Vert | Sachet propre | 2,0 | Standard | Mâle/femelle | 100 |
| 29031002 | Standard, embouts droits 17 mm | Adulte | Transp. | Sachet propre | 2,0 | Standard | Standard | 100 |
| 29002182 | Standard, embouts droits 17 mm | Adulte | Transp. | Stérile | 2,0 | Standard | Mâle/femelle | 50/300 |
| Lunettes Mac-Safe avec monitoring de CO₂ | | | | | | | | |
|  368MM | Tube prélèv. de gaz 3 m, Luer mâle | Adulte | Transp. | Sachet propre | 2,1 | Standard | Fits-All | 25 |
| 369MM | Tube prélèv. de gaz 3 m, Luer femelle | Adulte | Transp. | Sachet propre | 2,1 | Standard | Fits-All | 25 |
| Tubes de prélèvement de gaz | | | | | | | | |
|  892MM | 3 m, Luer mâle/mâle, DI 1,27 mm | | Transp. | Sachet propre | | | | 30 |
| 895MM | 3 m, Luer mâle/mâle, DI 1,68 mm | | Transp. | Sachet propre | | | | 30 |
| Sondes à oxygène | | | | | | | | |
|  19034182 | 8 œils latéraux, CH 8 | Adulte | Bleu | Stérile | 0,36 | Standard | Mâle | 100/1000 |
| 19035182 | 8 œils latéraux, CH 10 | Adulte | Bleu | Stérile | 0,36 | Standard | Mâle | 100/1000 |
| 19037182 | 8 œils latéraux, CH 12 | Adulte | Bleu | Stérile | 0,36 | Standard | Mâle | 100/1000 |
| 19038182 | 8 œils latéraux, CH 14 | Adulte | Bleu | Stérile | 0,36 | Standard | Mâle | 100/1000 |
|  19039182 | Compresse fixe, CH 8 | Adulte | Bleu | Stérile | 0,36 | Standard | Mâle | 100/600 |
| 19040182 | Compresse fixe, CH 10 | Adulte | Bleu | Stérile | 0,36 | Standard | Mâle | 100/600 |
| 19041182 | Compresse fixe, CH 12 | Adulte | Bleu | Stérile | 0,36 | Standard | Mâle | 100/600 |
| 19042182 | Compresse fixe, CH 14 | Adulte | Bleu | Stérile | 0,36 | Standard | Mâle | 100/600 |
|  19029182 | 8 œils latéraux, compresse ajustable CH 8 | Adulte | Bleu | Stérile | 0,36 | Standard | Mâle | 100/600 |
| 19030182 | 8 œils latéraux, compresse ajustable CH 10 | Adulte | Bleu | Stérile | 0,36 | Standard | Mâle | 100/600 |
| 19031182 | 8 œils latéraux, compresse ajustable CH 12 | Adulte | Bleu | Stérile | 0,36 | Standard | Mâle | 100/600 |
| 19032182 | 8 œils latéraux, compresse ajustable CH 14 | Adulte | Bleu | Stérile | 0,36 | Standard | Mâle | 100/600 |
| Tubes à oxygène | | | | | | | | |
|  400MM | Lumière standard | | Transp. | Sachet propre | 2,1 | Standard | Standard | 50 |
| 402MM | Lumière étoilée | | Transp. | Sachet propre | 2,1 | Etoilée | Standard | 50 |
|  16085182 | Lumière standard | | Blanc | Stérile | 1,5 | Standard | Standard | 50/300 |
| 16086182 | Lumière standard | | Bleu | Stérile | 1,5 | Standard | Standard | 50/300 |
| 16089182 | Lumière standard | | Vert | Stérile | 1,5 | Standard | Standard | 50/300 |

Tous les produits Unomedical ont le marquage CE, conformément à la Directive 93/42/EEC relative aux dispositifs médicaux.

Sous réserve d'erreur d'impression et de modification des spécifications des produits.

UNOMEDICAL FRANCE
55, Avenue des Templiers
Parc d'Activités Napollon
13400 AUBAGNE

Tél. : 0820 2006 56 (numéro indigo 0,09€ /min)
Fax : 04 42 71 64 12
Email : contactfrance@unomedical.com
www.unomedical.fr